

Q300 M MINI

ULTRA Compact, ULTRA Performant.



Séries Q
Fauteuils Roulants Électriques

Ingénierie de pointe. Adaptée à vos besoins.



Q300 M Mini

S'appuyant sur la maniabilité impressionnante et les performances appréciées de son prédécesseur le Salsa M2 Mini, la nouvelle génération de fauteuil électrique ultra-compact revient sur le devant de la scène - et regorge plus que jamais de caractéristiques dignes des fauteuils roulant électriques à dominante extérieure.



ALLEZ OÙ VOUS VOULEZ ! LE Q300 M MINI DÉPASSE LES LIMITES.

Toujours aussi étroit avec ses **520 mm** de largeur, le nouveau **Q300 M Mini** est le plus compact des fauteuils roulants électriques avec une **VÉRITABLE traction centrale** - avec un **rayon de giration** de seulement **560 mm**. Non seulement vous pouvez aller là où les autres ne peuvent pas, mais vous pouvez aussi faire demi-tour où ils ne peuvent pas !

Un niveau supérieur a été franchi pour les **performances en extérieur** grâce notamment au système de **suspension breveté aux 6 roues** - chaque roue est amortie pour une conduite sûre et confortable. S'attaquer à des bordures de 10 cm ? Aucune difficulté avec les roues motrices de 14". Sortir des sentiers battus ? Avec les **moteurs 2 pôles**, 6 km/h et 10 km/h (incluant Gyro), vous circulerez sur les terrains les plus difficiles avec aisance, là où d'autres feraient demi-tour. Et inutile de vous presser de rentrer, puisque le **Q300 M Mini** permet de **parcourir jusqu'à 35 kms** avec des batteries de 56Ah.

Se déplacer n'importe où est donc un jeu d'enfant avec le **Q300 M Mini**. Mais quand est-il de la **personnalisation** ? Côté style, le **Q300 M Mini** a une vraie personnalité à laquelle vous apporterez votre touche en choisissant parmi de nouveaux **styles de carénage** et différents coloris d'inserts. Côté assise et posture, le **Q300 M Mini** bénéficie de l'assise multi-réglable **Sedeo Lite** mais aussi de nombreuses **fonctions électriques** pour s'adapter à tous vos besoins et vos préférences.

Q300 M Mini



UN ESPACE EXIGU? DÉCOUVREZ LA BASE MOTRICE ULTRA-ÉTROITE!

ULTRA-COMPACTE - LARGEUR BASE MOTRICE 520 MM

La base du **Q300 M Mini** est si étroite 520 mm seulement qu'elle permet d'aller là où les autres fauteuils électriques ne peuvent pas aller. Qu'il s'agisse d'un salon exigu, d'une cuisine encombrée ou d'une porte étroite, le **Q300 M Mini** s'adapte à votre vie, et non l'inverse.

LARGEUR BASE MOTRICE 520 MM



ULTRA-COMPACT - RAYON DE GIRATION 560 MM

Grâce à sa VÉRITABLE technologie de traction centrale, le **Q300 M Mini** tourne sur place, garantissant un rayon de giration ultra-réduit de 560 mm. En comparaison, les fauteuils électriques avec une base motrice traction et propulsion doivent pivoter sur leurs roues motrices, augmentant ainsi le débattement nécessaire pour tourner.



QU'EST-CE QU'UNE VRAIE TECHNOLOGIE ROUES MOTRICES CENTRALES ?

Les roues motrices doivent être très précisément positionnées au milieu, dans le sens de la longueur du fauteuil. Si elles sont placées plus en avant ou en arrière le rayon de giration est plus large et le poids étant moindre sur la roue motrice, la traction est réduite. Le **Q300 M Mini**, quant à lui, offre le rayon de braquage le plus compact, ainsi qu'une traction et une stabilité supérieures grâce à sa conception de véritable roues motrices centrales.



LONGUEUR TOTALE 1060 MM

Avec une longueur de seulement 1060 mm, le Q300 M Mini rentre et sort facilement des plus petits ascenseurs et des endroits exigus, comme les cuisines. Son poids, à partir de 103 kg lui permet d'emprunter la plupart des ascenseurs.



DES RÉPONSES A VOS CONTRAINTES QUOTIDIENNES

HAUTEUR D'ASSISE A PARTIR DE 410 MM

Installez-vous confortablement sous les tables ou accédez au volant de votre véhicule adapté grâce aux hauteurs d'assise réduites du **Q300 M Mini**, à partir de 410 mm (avec bascule d'assise manuelle) et 430 mm (avec combiné lift/basculé d'assise électrique).



VOS TRANSFERTS SIMPLIFIÉS AVEC LES ACCOUDOIRS RELEVABLES

Si vous rencontrez des difficultés lors de vos transferts, optez pour les accoudoirs relevables vers l'arrière du **Q300 M Mini**. Une fois relevés, les côtés de votre fauteuil sont complètement dégagés.

Vous avez également le choix entre des versions amovibles ou inclinables.



PRENEZ DES VIRAGES PLUS SERRÉS GRÂCE AU REPOSE-JAMBES CENTRAL

Le repose-jambes à montage central supprime le dépassement à l'avant que nécessite des repose-jambes latéraux traditionnels. Vous pouvez donc non seulement effectuer des virages serrés sans vous préoccuper d'accrocher des objets, mais aussi vous rapprocher des tables. Il est tout aussi facilement réglable en longueur et en angle.



BOÎTIER DE COMMANDE GÊNANT?

Pour tous ces moments où vous avez besoin de vous rapprocher un peu plus, pivotez simplement votre manipulateur sur le côté (ou éventuellement relevez l'accoudoir vers l'arrière).

PERFORMEUR A L'EXTÉRIEUR

A man with short dark hair, wearing a dark green jacket, a dark blue scarf, and dark trousers, is sitting on a black and red Quickie Q300 M Mini electric wheelchair. He is positioned on a concrete ramp that leads up to a metal gate. The gate is made of a grid of metal bars and has some graffiti on it. To the right of the gate, there is a colorful, abstract sculpture made of many small, colorful pieces. The background shows a brick wall and some other structures. The overall scene is outdoors, and the lighting is natural.

REDOUTABLE PERFORMEUR EN EXTÉRIEUR

Faites l'expérience d'un véritable fauteuil électrique compact avec des performances extérieures vraiment sensationnelles. Assez étroit pour être agile dans les lieux publics très fréquentés et aussi puissant que des fauteuils électriques plus imposants à dominante extérieure.

Excellentes performances et plaisir à la clé.

TECHNOLOGIE ANTI-PITCH

Traditionnellement, lorsqu'un fauteuil électrique s'arrête sur une pente, le fauteuil a tendance à se balancer de droite à gauche. Avec le Q300 M Mini, ce phénomène de tangage est inexistant grâce à la technologie Anti-Pitch. Vous restez en sécurité et stable dans votre siège.

SUSPENSION INDÉPENDANTE A CHAQUE ROUE

Grâce au système de suspension indépendante développé par Quickie, les six roues restent au sol pendant la montée et la transition des obstacles. Comme chaque roue a sa propre suspension, toutes les imperfections du sol sont absorbées par la suspension de la roue subissant les chocs, ce qui vous assure une conduite douce et souple.



GRIMPER SUR LES TROTTOIRS.

Pas d'abaissement de trottoir en vue sur votre parcours ? Avec le **Q300 M Mini**, inutile de faire un détour pour trouver un bateau. Avec ses roues motrices de 12.5" vous franchissez facilement des trottoirs de 7 cm. Et si vous cherchez à gérer de plus hauts obstacles alors préférez les roues motrices de 14" et affrontez des bordures de 10 cm sans difficulté.





EVOLUEZ ENTRE LES OBSTACLES

La base motrice ultra-compacte de 520 mm est très utile à l'intérieur, mais pas seulement! Vous pouvez vous faufiler sans effort entre les voitures garées ou empruntez des sentiers étroits.

GRANDE AUTONOMIE

Avec des batteries de 56 Ah, le **Q300 M Mini** vous emmène partout avec une autonomie* impressionnante allant jusqu'à 36 km.

*autonomie selon ISO 7176-4



QUELLES ROUES MOTRICES ?

UNE PLUS GRANDE TRACTION

Grâce à sa VÉRITABLE technologie de traction centrale, votre assise est positionnée directement au-dessus de la roue motrice, ainsi le poids supplémentaire augmente la traction sur la roue et diminue le glissement.

ROUES MOTRICES 12.5"

Intéressé par la largeur la plus compacte pour gagner en maniabilité, avec un rayon de giration le plus petit possible? Le **Q300 M Mini** configuré avec des roues motrices de 12.5" garanti une largeur totale de seulement 520 mm et un rayon de giration de 560 mm.

ROUES MOTRICES 13"

Vous préférez le meilleur des deux mondes ? Les roues motrices de 13" garderont votre **Q300 M Mini** tout aussi compact avec 540 mm de largeur, mais vous apporteront une stabilité et une traction supérieures lorsque vous êtes à l'extérieur.

ROUES MOTRICES 14"

Si vous recherchez la performance pour en profiter à l'extérieur, alors c'est la fluidité de conduite qu'apporte les roues de 14" qu'il vous faut (avec une largeur totale de 570 mm). Offrant la meilleure traction et la meilleure stabilité, vous pouvez également franchir des obstacles (tels que les trottoirs) de 10 cm maximum.

VOTRE COMPAGNON DE VOYAGE

Vous prenez les transports en commun? La largeur ultra-réduite du Q300 M Mini (520 mm) et son rayon de braquage de 560 mm vous aideront à négocier une place même sur les trajets les plus fréquentés.





Le Q300 M Mini est crash-testé avec la station d'arrimage Dahl.

IDEAL POUR LES BRAS ÉLEVATEURS

Pesant 103 kg (batteries 41 Ah), le **Q300 M Mini** peut être soulevé et chargé sans effort dans votre véhicule. De nombreuses options du **Q300 M Mini** permettent de gagner de la place dans le véhicule, comme le dossier rabattable sur l'assise, les repose-jambes escamotables et amovibles ou encore les accoudoirs également amovibles.



MAINTENIR LA TRACTION SUR LES RAMPES

La traction peut parfois être perdue sur les rampes car les roues avant forcent les roues motrices à quitter le sol. Avec le **Q300 M Mini**, les bras des roues avant se déplacent indépendamment de la base, de sorte que les roues motrices conservent leur traction.



FAUTEUIL ADAPTÉ AUX VÉHICULES AMÉNAGÉS

Grâce à sa hauteur d'assise très basse (à partir de 415 mm), le **Q300 M Mini** se glisse facilement sous le volant de votre véhicule aménagé. Ultra-étroit, aucun risque de s'accrocher à des éléments de l'habitacle de votre voiture.



UN CONFORT DE PREMIÈRE CLASSE.

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO LITE

Le confort est absolu avec le système d'assise **SEDEO LITE**. En combinant un châssis d'assise réglable, configurable et personnalisable, le système d'assise **SEDEO LITE** est conçu pour s'adapter à vos besoins même s'ils évoluent. Rapide et facile à régler avec un seul outil.

APPUI-TÊTE INTÉGRÉ AU DESIGN DU FAUTEUIL

La fixation de l'appui-tête est intégrée dans la conception du fauteuil. Celle-ci est compatible avec les appuis-tête **SEDEO** et **WHITMYER** pour répondre aux différents besoins cliniques, modérés à élevés.

OPTEZ POUR LE CONFORT

Sélectionnez parmi une large gamme de coussins d'assise et de dossier, incluant quatre coussins d'assise et de dossier. Des coussins de dossier réglables en tension et disponibles en différents galbes pour un confort et un positionnement optimisés et personnalisés.



TOILE DE DOSSIER RÉGLABLE EN TENSION

La toile de dossier standard offre un revêtement doux et confortable. Réglage de la tension par 4 sangles pour s'adapter à la morphologie de l'Utilisateur.



ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT & RAIL D'ASSISE INTÉGRÉ

Différents éléments de positionnement sont disponibles comme les cales tronc escamotables, les cales cuisses et supports genoux. Simples à escamoter et à retirer. Le rail d'assise offre de nombreuses possibilités pour le montage des différents éléments de positionnement.

REPOSE-JAMBES A COMPENSATION

Le repose-jambes à compensation de longueur vous permet d'atteindre la meilleure position. Repose-jambes latéraux et centraux également disponibles, en version manuelle ou électrique.



JAY & WHITMYER

LE POSITIONNEMENT

Vous avez une exigence clinique spécifique en matière de positionnement? Le système d'assise **SEDEO LITE** est compatible avec une large gamme d'appui-tête **WHITMYER** et les coussins d'assise et de dossier **JAY** pour répondre aux besoins cliniques de chacun.

COUSSINS ET DOSSIERS JAY

Conçus pour la stabilité du bassin, la protection de la peau et le confort. Les coussins et dossiers **JAY** sont disponibles en diverses tailles, formes, galbes, contours, matières, degré de prévention... pour satisfaire les différents besoins en soutien postural et protection cutanée.

APPUIS-TÊTE WHITMYER

Conçus pour répondre aux besoins simples de soutien de la tête comme au contrôle de plusieurs points. Différents choix de coussinets, de tailles et de supports pour couvrir et personnaliser tous les besoins individuels.



PERSONNALISATION DÉBORDANTE.

UNE VRAIE PERSONNALITÉ

Le Q300 M Mini offre plus de 97 combinaisons de couleurs, y compris de nouveaux motifs pour le carénage ! Vous pouvez même coordonner ou contraster les couleurs de votre choix grâce à des inserts supplémentaires, pour les enjoliveurs et les bouchons de tête de fourches. Alors, quelle est votre combinaison préférée ?

COLORIS DES INSERTS



Vert Pomme



Orange



Bleu



Rouge



Argent



Blanc




Noir

CARÉNAGES GRAPHIQUES :



CARÉNAGES UNIS:

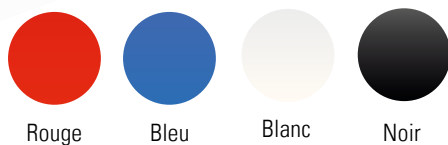

VOUS RECHERCHER UN CARÉNAGE VRAIMENT UNIQUE?

Notre service de personnalisation Built-4-Me peut vous aider à réaliser le design de carénage de votre choix, exactement selon vos envies et bien plus encore !




A CHACUN SES FONCTIONS D'ASSISE.

FONCTIONS ÉLECTRIQUES

Le **Q300 M Mini** n'a pas seulement des performances de grand fauteuil électrique, il a aussi les fonctionnalités d'un grand fauteuil électrique ! Qu'il s'agisse d'incliner, d'élever, de basculer l'assise ou relever les jambes, le **Q300 M Mini** est doté de nombreuses fonctions pour répondre à vos besoins cliniques et à votre mode de vie.

BASCULE D'ASSISE

Le plus petit des fauteuils 6 roues **QUICKIE** peut être équipé d'une bascule d'assise de 30° pour soulager les pressions.

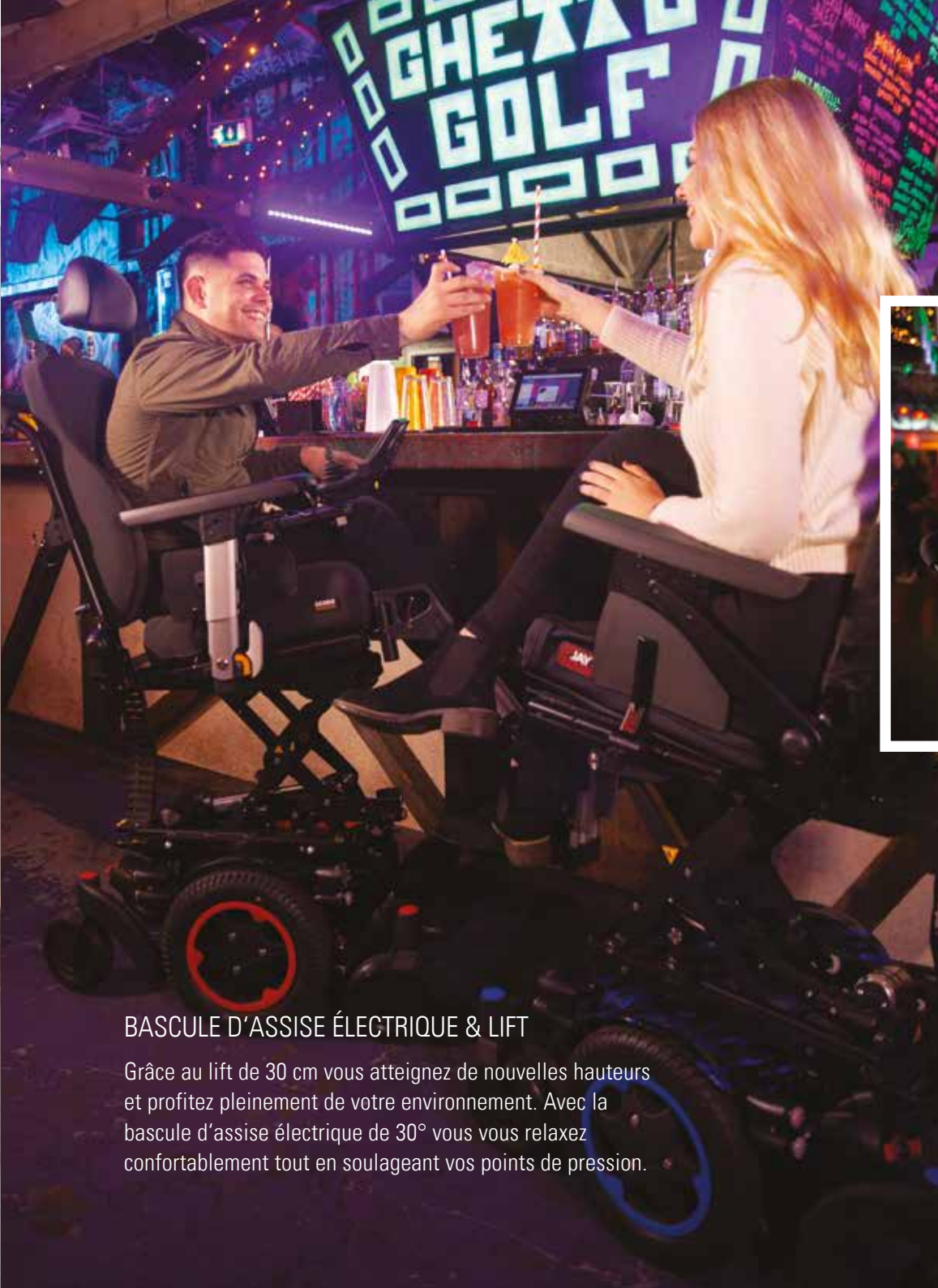

BASCULE D'ASSISE ÉLECTRIQUE & LIFT

Grâce au lift de 30 cm vous atteignez de nouvelles hauteurs et profitez pleinement de votre environnement. Avec la bascule d'assise électrique de 30° vous vous relaxez confortablement tout en soulageant vos points de pression.



DOSSIER INCLINABLE ÉLECTRIQUE

Vous modifiez votre position quand bon vous semble en totale autonomie.

POTENCES OU REPOSE-JAMBES

Choisissez parmi des potences 70° ou des repose-jambes manuels ou électriques.

R-NET

TECHNOLOGIE DE POINTE

BOÎTIER DE COMMANDE

Chaque Q300 M Mini est équipé de la technologie avancée R-Net pour une expérience de conduite unique. Différents manipulateurs pour répondre aux besoins les plus simples aux plus complexes. De série, le boîtier R-Net LED, aux fonctionnalités classiques ou pour rester connecté à votre environnement le modèle R-Net Advanced (ci-contre) aux multiples fonctions intégrées.

INFRAROUGE

Prenez le contrôle de votre environnement en utilisant la fonctionnalité Infrarouge intégrée. Contrôlez simplement par votre joystick, vos appareils, tels que téléviseur, DVD, station d'accueil ... ou encore allumez et éteignez les lumières de votre intérieur.

ASSIGNATION DE BOUTONS

Changez la fonction de n'importe quel bouton par celle de votre choix, grâce à la technologie d'assignation brevetée **QUICKIE**. De plus, vous pouvez attribuer une seconde fonction (appui long) à un même bouton, vous donnant un accès plus rapide, plus simple et plus fluide aux fonctions que vous utilisez régulièrement sans avoir à utiliser votre joystick.

COMMANDES SPÉCIALES SWITCH-IT

Si la conduite avec un joystick traditionnel n'est pas la meilleure option, les commandes de conduite alternatives vous permettent de profiter pleinement des capacités de conduite et des avantages de votre fauteuil.



LINK-IT SYSTÈME DE FIXATION

Fixez facilement des commandes spéciales à votre Q300 M Mini avec Link-It. Les modules et les tiges s'assemblent facilement pour relier votre commande à votre fauteuil. Facile à positionner, minimaliste et simple à utiliser !



A man and a woman are sitting in motorized wheelchairs on a city street at night. The woman, on the left, is wearing a yellow and white striped coat and a black beanie. The man, on the right, is wearing a dark jacket and a black scarf. They are both smiling and looking at each other. The background is a blurred city street with lights and other people. The text "NOTRE PRIORITÉ, C'EST VOUS." is overlaid on the left side of the image.

NOTRE PRIORITÉ,
C'EST VOUS.

KIT ÉCLAIRAGE

Optez pour un kit éclairage pour votre sécurité mais aussi pour vous aider à vous déplacer lors de vos soirées.

DONNÉES TECHNIQUES

Q300 M MINI

Poids max. Utilisateur:	136 kg	Espace de braquage:	1100 mm (largeur requise pour marche arrière)
Largeur d'assise réglable:	385 - 510 mm	Pente max. sécurité:	6°
Profondeur d'assise réglable:	410 - 560 mm	Franchissement (selon roues):	70 mm (12.5" et 13"), 100 mm (14")
Hauteur d'assise:	410 - 490 mm	Diamètre roues:	12.5", 13" ou 14" (roues motrices) - 7" (roues avant et arrière)
Hauteur de dossier:	460 - 510 mm	Coloris:	7 coloris inserts, 10 carénages graphiques, 4 carénage unis
Inclinaison de dossier:	86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106° (manuelle/platine) 85° - 120° (par vérin via tierce personne) 85° - 120° (électrique)	Autonomie (selon ISO 7176-4)	25 km (batteries 41 Ah) 35 km (batteries 56 Ah)
Bascule d'assise:	0°, 3°, 6°, 9° (manuelle/platine) 0° - 30° ou -5° - 25° (électrique)		
Lift:	300 mm	Electronique:	R-Net
Largeur totale (selon roues):	520 mm (12.5") - 540 mm (13") - 570 mm (14")	Poids fauteuil:	A partir de 103 kg (incluant batteries 41 Ah) - 80 kg (sans batteries)
Longueur totale:	1060 mm - 1180 mm (avec repose-jambes)		
Rayon de giration :	560 mm	Crash Test:	Certifié comme pouvant être utilisé comme siège face à la route dans les véhicules à moteur. Fixation: 4 points d'ancrage au fauteuil + système de retenue à sangle, 6 points (2 sangles à l'avant, 4 sangles à l'arrière). Aucune ceinture de sécurité ancrée autorisée. La facilité d'accès et de maniabilité dans un véhicule dépend de la taille du fauteuil roulant.
Vitesse:	6 km/h (2 pôles 2x300 W) 10 km/h (2 pôles 2x350 W)	Transport à vide:	S'assurer de la bonne fixation du fauteuil



Sunrise Medical SAS
ZAC De La Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr



Pour plus d'informations, sur les fonctions, options et accessoires, veuillez vous référer à la fiche de mesure. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les données techniques de ses produits sans préavis.