


## Fauteuil d'accès à la douche sur rails Showerbuddy

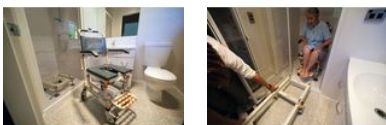

- 822046

- De quoi faciliter les déplacements et la toilette pour la douche
- Vidéo de présentation et d'utilisation disponible (modèle bain)

Avec très peu d'espace, vous pouvez utiliser notre fauteuil ShowerBuddy pour accéder à votre douche. Le principe est simple : l'utilisateur ne bouge jamais de son fauteuil entre l'extérieur et l'intérieur de la douche. Il suffit que l'aidant positionne la chaise en face des rails déjà posés dans le receveur de douche, verrouille le pont et fasse coulisser la chaise avec l'utilisateur dans le bac à douche. Une fois dans la douche, le pont peut être facilement enlevé pour utiliser un pare-douche. Une fois la douche faite, le pont se repositionne en un clin d'oeil et la chaise peut ressortir sans effort. Structure aluminium anticorrosion.

Dimensions chaise hors-tout : larg. 57 x prof. 106 x haut. 109,5 à 116 cm. Haut. sous structure 41 à 48 cm. Poids 16,8 kg. Prof. totale avec 3 éléments 158,5 cm.  
Dimensions assise chaise : larg. 46 x prof. 42 x haut. 55 à 68 cm. Haut. dossier 54,5 cm. Haut. accoudoirs 24 cm.  
Dimensions partie baignoire : larg. 50,5 cm.

Poids Max : 160 kg.

Poids total 24,9 kg.